



Einwilligungserklärung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Hersteller liegt vor

**Patient:in**  
 Name: \_\_\_\_\_  m  w  
 Vorname: \_\_\_\_\_  m  w  
 Geb.-Datum: \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Firmenanschrift**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Kostenvoranschlag an Fax/Email:**

**Bestellung**

**Lieferanschrift**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Neuversorgung  
 Nachbestellung, Maßnr.: \_\_\_\_\_  
 Änderungen beachten

**Interne Vermerke**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<b>Anzahl</b> <input type="radio"/> Stück	<b>Artikel</b> <input type="radio"/> Arm spezial <input type="radio"/> Weste <input type="radio"/> Jacke	<b>Material</b> <input type="radio"/> Nature gestrickt <input type="radio"/> Nature gewebt <input type="radio"/> Skin <input type="radio"/> Rigid <input type="radio"/> Silver	<b>Farbe</b> <input type="radio"/> beige <input type="radio"/> schwarz <input type="radio"/> rosa  <input type="checkbox"/> <b>Nähte bunt</b>	<input type="radio"/> mint <sup>1</sup> <input type="radio"/> jeans  <small>(<sup>1</sup> nicht Skin, <sup>2</sup> nicht Nature gewebt, <sup>3</sup> nur Skin, <sup>4</sup> nur Rigid/Nature gestrickt)</small>	<input type="radio"/> rot <sup>2</sup> <input type="radio"/> trend <sup>3</sup>	<input type="radio"/> anthrazit <sup>4</sup> <input type="radio"/> nachtblau <sup>4</sup>
--	---	---	--	--	--	--

**Besonderheiten** (bitte Fotos beilegen und **einzeichnen**)

<input type="checkbox"/> Amputation	<input type="checkbox"/> Memoryschaum	<input type="checkbox"/> Zusätzliche Öffnung	<input type="checkbox"/> ARION Anziehhilfe Gr.:__
<input type="checkbox"/> Druckpelotte	<input type="checkbox"/> Silon-TEX	<input type="checkbox"/> Kunstleder	

**Bügelbild:**  
 Eule  Spinne  
 Katze  Hubschrauber

## Rechte Patient:innenseite

① Halsumfang zirkulär über 7. Cervicalwirbel und Oberkante Sternum  
 ② halber Unterachselumfang vorn eingeatmet

13 \_\_\_\_\_ Schulterlänge rechts  
 14 \_\_\_\_\_ Achselumfang rechts  
 16 \_\_\_\_\_ Schulterkappe rechts  
 18 \_\_\_\_\_ Länge bis Oberarmmitte  
 20 \_\_\_\_\_ Länge bis Ellenbogen  
 22 \_\_\_\_\_ Länge bis Unterarmmitte  
 24 \_\_\_\_\_ Länge bis Handgelenk

15 \_\_\_\_\_ Oberarmumfang rechts  
 17 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)  
 19 \_\_\_\_\_ Ellenbogenumfang  
 21 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)  
 23 \_\_\_\_\_ Handgelenkumfang

4 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Unterachselumfang  
 3 \_\_\_\_\_ Unterachselumfang zirkulär eingeatmet  
 6 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Unterbrustumfang  
 5 \_\_\_\_\_ Unterbrustumfang eingeatmet  
 8 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Taille  
 7 \_\_\_\_\_ Taillenumfang  
 9 \_\_\_\_\_ Beckenumfang  
 10 \_\_\_\_\_ Länge Oberkante Sternum bis Bandagenende  
 37 \_\_\_\_\_ Länge 7. Cervicalwirbel bis Bandagenende

## Linke Patient:innenseite

12 \_\_\_\_\_ Achselumfang links  
 11 \_\_\_\_\_ Schulterlänge links  
 25 \_\_\_\_\_ Oberarmumfang links  
 26 \_\_\_\_\_ Schulterkappe links  
 27 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Oberarm (dickste Stelle)  
 28 \_\_\_\_\_ Länge bis Oberarmmitte  
 29 \_\_\_\_\_ Ellenbogenumfang  
 30 \_\_\_\_\_ Länge bis Ellenbogen  
 31 \_\_\_\_\_ Umfang Mitte Unterarm (dickste Stelle)  
 32 \_\_\_\_\_ Länge bis Unterarmmitte  
 33 \_\_\_\_\_ Handgelenkumfang  
 34 \_\_\_\_\_ Länge bis Handgelenk

### Arm rechts

**Achselkompression**  ja  nein

#### Verschluss

Länge \_\_\_\_\_ cm  
 von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_  
 Reißverschluss  
 eingenäht  aufgenäht  
 Klett  Klett über RV  
 Haken/Ösen  
 Daumenseite, vorn  
 Kleinfingerseite, hinten  
 innen  
 außen  
 Streckdefizit: \_\_\_\_°  
 Haftband  3 cm  5 cm  
 Haftbandstücke  Haftpads  
 elast. Abschlussband  
 3 cm  5 cm

### Thorax

Halsausschnitt vorn  
 \_\_\_\_\_ cm ab Sternum  
 Halsausschnitt hinten  
 \_\_\_\_\_ cm ab 7. Cervicalwirbel  
 Raglanarm (Standard)  Kugelarm  
 **Kragen**  
 Umfang oben: \_\_\_\_\_ cm  
 Umfang unten: \_\_\_\_\_ cm  
 Höhe vorn: \_\_\_\_\_ cm  
 Höhe hinten: \_\_\_\_\_ cm  
 Sternum-Hals unten: \_\_\_\_\_ cm  
 **Brustkörbchen**  
 mit Kompression  ohne Kompression  
 re: A B C D E F  
 li: A B C D E F  
 Epithesentasche  rechts  links

### Verschluss

Reißverschluss  
 eingenäht  aufgenäht  
 Klett  Klett über RV  
 Haken/Ösen  
**Position**  Brust  Rücken  
 Schonhaltung  
 Bauch  
 Schrittgurt \_\_\_\_\_ cm lang  
 Haftband  3 cm  5 cm  
 Haftbandstücke  Haftpads  
 elast. Abschlussband  
 3 cm  5 cm  
 Taillenumfang  
 Klett zur Hose


### Arm links

**Achselkompression**  ja  nein

#### Verschluss

Länge \_\_\_\_\_ cm  
 von: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_  
 Reißverschluss  
 eingenäht  aufgenäht  
 Klett  Klett über RV  
 Haken/Ösen  
 Daumenseite, vorn  
 Kleinfingerseite, hinten  
 innen  
 außen  
 Streckdefizit: \_\_\_\_°  
 Haftband  3 cm  5 cm  
 Haftbandstücke  Haftpads  
 elast. Abschlussband  
 3 cm  5 cm

Firmenanschrift/Ansprechpartner:in

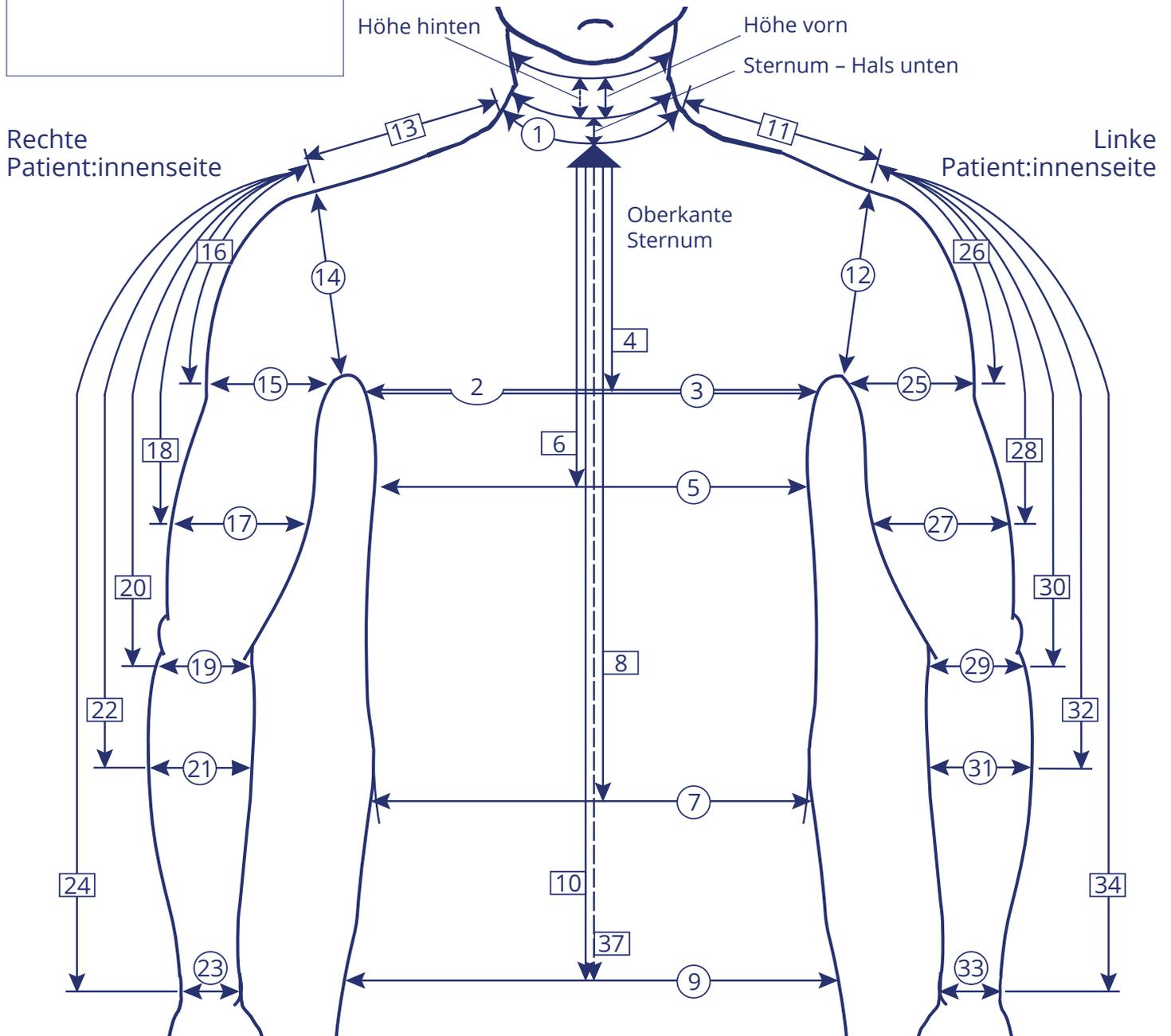

### Hinweise zum exakten Maßnehmen einer CICATREX-Jacke

- Für eine genaue Messung sollten Sie ein flexibles Maßband sowie einen Bodymarker verwenden.
- Alle Maße werden in natürlicher Körperhaltung der Patientin/des Patienten genommen.
- Zeichnen Sie nach Möglichkeit den Umriss der Jacke in die Skizze ein und schraffieren Sie die Narbenbereiche.
- Druckpelotten, Silon-Tex, zusätzliche Öffnungen sowie zusätzliche Maße, die der Maßnehmende für wichtig hält, sind in die Skizze einzutragen.
- Die Längenmaße für die Ärmel werden ab dem Akromion genommen. Bitte messen Sie dabei stets an der Außenseite des Armes über den Epicondylus lateralis.

### Erklärung der Symbole und Abkürzungen

- ⌒ = semizirkuläres Maß      RV = Reißverschluss
- = zirkuläres Maß
- = Längenmaß