


**GRÖSSENTABELLEN**

 Lieferung aus  
**Deutschland**

 **Serienprodukte -**  
schnellere Verfügbarkeit

CICATREX contour Jacke

Größe	Umfang in cm			Artikelnummer
	Oberarm	Brust	Unterbrust	
XS	26.5 - 27.5	83 - 87	69 - 73	34870100200399
S	27.5 - 28.5	87 - 91	73 - 77	34870100300399
M	28.5 - 30.5	91 - 97	77 - 83	34870100400399
L	30.5 - 32.5	97 - 101	83 - 87	34870100500399
XL	32.5 - 35.5	101 - 107	87 - 93	34870100600399
XXL	35.5 - 38.5	107 - 115	93 - 101	34870100700399
XXXL	38.5 - 43.5	115 - 123	101 - 109	34870100800399

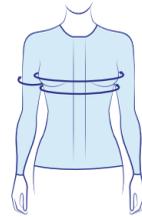

HMV-Nr. 17.11.01.0006

CICATREX contour Weste

Größe	Brustumfang in cm	Artikelnummer
XS	76 - 86	34860100200399
S	86 - 94	34860100300399
M	94 - 102	34860100400399
L	102 - 110	34860100500399
XL	110 - 118	34860100600399
XXL	118 - 128	34860100700399



HMV-Nr. 17.11.01.0007

CICATREX contour Hose Slipform mit hoher Taille,  
Leggings mit niedriger und hoher Taille

Größe	Umfangmaße in cm			Artikelnummer		
	Taille	Gesäß	Oberschenkel gemessen ca. 2 cm unterhalb des Schritts	Hose Slipform mit hoher Taille	Leggings mit niedriger Taille	Leggings mit hoher Taille
XS	61 - 66 cm	86 - 91 cm	48 - 51 cm	34810100200399	34820100200399	34830100200399
S	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm	34810100300399	34820100300399	34830100300399
M	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm	34810100400399	34820100400399	34830100400399
L	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm	34810100500399	34820100500399	34830100500399
XL	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm	34810100600399	34820100600399	34830100600399
XXL	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm	34810100700399	34820100700399	34830100700399
XXXL	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm	34810100800399	34820100800399	34830100800399
XXXXL	109 - 119 cm	135 - 145 cm	77 - 86 cm	34810100900399	34820100900399	34830100900399



HMV-Nr. 17.06.06.0009 - Hose Slipform mit hoher Taille

HMV-Nr. 17.06.06.0010 - Leggings mit niedriger Taille

HMV-Nr. 17.06.06.0008 - Leggings mit hoher Taille

**WINGS  
FOR YOUR HEALTH**



**THUASNE®**

**CICATREX  
contour**

Kompressionstextilien  
für die postoperative Versorgung



[www.thuasne.de](http://www.thuasne.de)



Photos : Studio Caterin - TM13496BDD08\_10\_2025-02

 **Thuasne Deutschland GmbH**  
Sydney Garden 9  
D-30539 Hannover

 **Thuasne Switzerland SA**  
Rue du marché 20, 1204 Genève  
SWITZERLAND

 **UK Responsible Person (UKRP):**  
**Thuasne UK Ltd**  
Unit 4 Orchard Business Centre, North Farm Road  
Tunbridge Wells TN2 3XF, United Kingdom

# CICATREX contour

Kompressionstextilien für die postoperative Versorgung

CICATREX contour Kompressionstextilien aus der Narbentherapie dienen zur Verbesserung und Stabilisierung von Operationsergebnissen nach plastisch-ästhetischen Eingriffen oder bei medizinischen Behandlungen von Lymph- und Lipödemen.

CICATREX contour vereint stilvolles Design<sup>1</sup> mit durchdachten Details für ein sanftes und angenehmes Tragegefühl<sup>2</sup>.

Die hohe Elastizität des Materials sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und erleichtert das An- und Ausziehen der Kompressionskleidung.

CICATREX contour Kompressionstextilien sind zur Versorgung der unteren Extremität verfügbar als:

- Leggings mit niedriger Taille
- Leggings mit hoher Taille
- Hose Slipform mit hoher Taille


und zur Versorgung der oberen Extremität verfügbar als:

- Jacke für Damen
- Weste für Herren.

## Indikationen

Schädigung der Haut und der Heilungsfunktion der Haut mit hypertropher Narbenbildung oder Keloidbildung:

- nach Verletzungen/Verbrennungen/chirurgischen Eingriffen
- Hauttransplantationen
- zur Verbesserung der Narben-/Wundheilung bis zur vollständigen Abheilung der Narbe
- zur Stabilisierung von Operationsergebnissen
- medizinische Versorgung von akuten und chronischen Lymphödemen
- Lipödem-Schmerzen

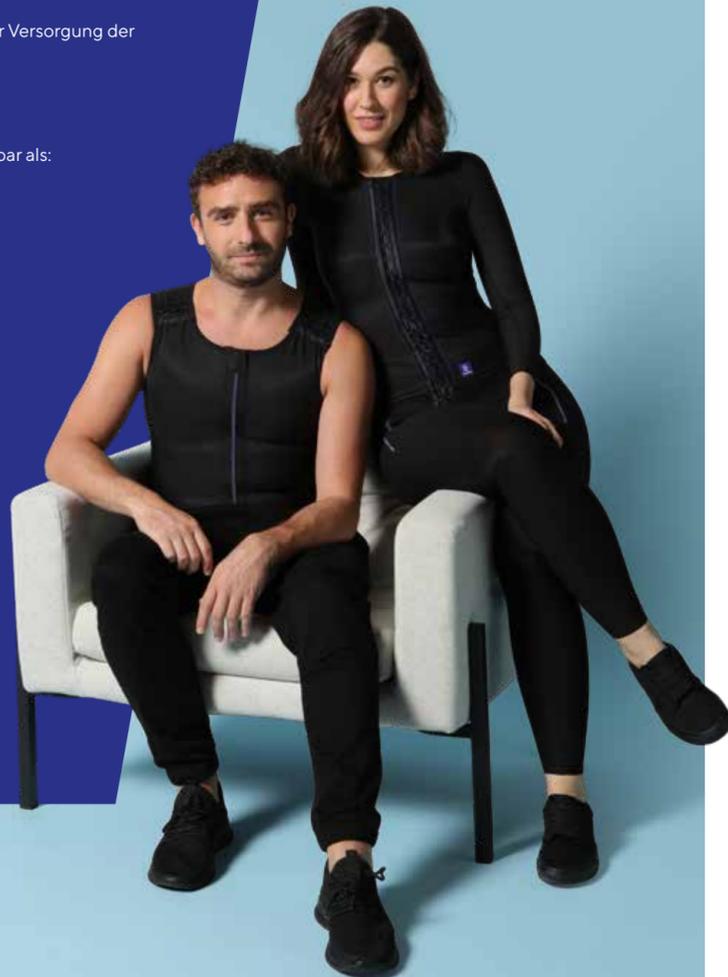

## CICATREX contour

### VORTEILE FÜR PATIENTEN:

- Kompressionsversorgung mit umfassendem Schutz für die Narbe
- Hypoallergener Stoff beugt Entzündungen im Gewebe vor und lindert den Juckreiz
- Weicher, elastischer Bund am Saum
- Glatter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl
- Modisch neutrales Design in eleganten Schwarz-Tönen mit flachen Nähten und verdeckten Reißverschlüssen, kombinierbar mit alltäglicher Kleidung

### JACKE



Die Jacke (Versorgung für Frauen) vereint ästhetisches Design mit hohem Tragekomfort:

- Gemoldete Cups (nahtlos)
- Vordere Haken- und Ösenverschlüsse
- Schnittfestes Gewebe, Ärmel können gekürzt werden
- Keine Naht im axillären Bereich
- Verfügbare Größen: XS - XXXL



3-fache Weitenverstellung der Haken- und Ösenverschlüsse

### WESTE



Die Weste (Versorgung für Männer) vereint ästhetisches Design mit hohem Tragekomfort:

- Reißverschluss mit Haken und Ösen an der Unterseite für ein einfacheres An- und Ausziehen
- Verdeckte Reißverschlusskanten
- Weiche Haken/Ösen
- Verfügbare Größen: XS - XXL



3-fach verstellbare Schulterlänge

## CICATREX CONTOUR KLEIDUNGSTEXTILIEN BESTEHEN AUS ELASTISCHEM STRETCHMATERIAL.

Die Produkte des CICATREX contour Sortiments bestehen aus 59 % Polyamid und 41 % Elasthan. Die hohe Elastizität in Längs- und Querrichtung ermöglicht ein leichteres An- und Ausziehen der Kleidung und bietet eine gute Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Umfänge.



### VORTEILE DES GEWIRKTEN CICATREX CONTOUR MATERIALS:

- Schnittfest und laufmaschenfrei: Hosenbeine können mit einer handelsüblichen Schere gekürzt werden, ohne auszufransen (Tipp: Nahtenden anschließend mit einem Riegel sichern.).
- Formstabil: Behält seine Form, auch bei besonders dünnem Material.
- Knitterfrei: Keine Faltenbildung, für eine dauerhaft glatte Optik.

## KOMPRESSIONSTEXTILIEN FÜR DIE POSTOPERATIVE VERSORGUNG

CICATREX contour Kompressionstextilien unterstützen den postoperativen Ausgleich von Unregelmäßigkeiten an der Hautoberfläche. Das hochwertige Material, äquivalent zur Kompressionsklasse 2, kann die Formgebung optimieren, Kontur-unregelmäßigkeiten weitgehend verhindern und die Narbenheilung verbessern.

Die CICATREX contour Leggings und Hose in Slipform mit hoher Taille überzeugen durch folgende Eigenschaften und Vorteile:

- Premium Kompressionsmaterial für einen flächigen Druck, äquivalent zur Kompressionsklasse 2 (entspricht den medizinischen Standards)
- Höherer Kompressionsdruck im distalen Bereich zur Vermeidung von Flüssigkeitsverlagerungen
- Offener Schritt: Die Hygieneöffnung ermöglicht ein uneingeschränktes und angenehmes Tragegefühl

### LEGGINGS



Leggings mit niedriger oder hoher Taille:

- Entscheidung für eine niedrige oder hohe Taille ist abhängig von der Operationshöhe (Oberschenkel, Unterleib etc.)
- Verfügbare Größen: XS - XXXXL



Separate Einlage für den offenen Schritt zur Abpolsterung empfindlicher Hautstellen



Beidseitige Reißverschlüsse mit Haken und Ösen erleichtern das An- und Ausziehen

### HOSE SLIPFORM MIT HOHER TAILLE



Hose Slipform mit hoher Taille:

- Hohe Taillenform mit einem breiten elastischen Bund für einen sicheren Halt
- 3-fach verstellbarer Haken- und Ösen-Verschluss im Schrittbereich
- Verfügbare Größen: XS - XXXXL



Von innen gepolsterter Reißverschluss für ein sanftes Tragegefühl auf der Haut



Einseitiger Reißverschluss auf der rechten Seite mit Haken und Ösen erleichtert das An- und Ausziehen